


Saljol Komfort-Rückengurt für Saljol Carbon Rollator und Allround Rollator

Bedienungsanleitung

Hersteller: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
Phone: +49 (0)8141 317740
Fax: +49 (0)8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de
Web: www.saljol.de

Produktübersicht

- 1 Reflektorstreifen
- 2 Aussparung für bessere Sicht auf den Boden vor Ihnen
- 3 Atmungsaktives Netzfutter
- 4 Befestigungsschiene
- 5 Schrauben zur Längenverstellung
- 6 Rastnase

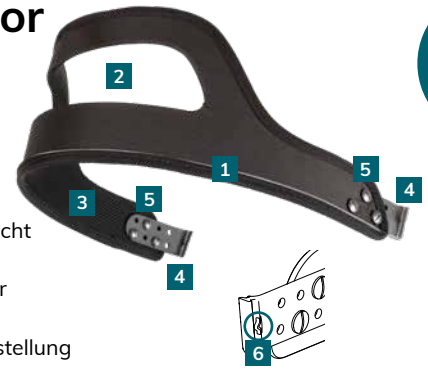

DE

Artikelnummer: 4058789015261



Dieser Rückengurt passt auf alle Saljol Carbon/Allround Rollator-Modelle ab Herstellungsdatum 12/2023, erkennbar an der Einkerbung an der Halterung auf der Vorderseite der Handgriffe.

Montage/Demontage



Führen Sie die beiden Befestigungsschienen des Rückengurtes in die Halterungen an der Vorderseite der Handgriffe Ihres Saljol Carbon/Allround Rollators ein bis die Rastnase mit einem „Klick“ einrastet. Achten Sie beim Montieren des Gurtes immer darauf, dass der Reflektorstreifen außen ist.



Legen Sie einen Finger wie abgebildet unter der Befestigungsschiene an. Nun ziehen Sie die Befestigungsschiene mit dem Finger senkrecht nach oben heraus, mit dem Daumen können Sie dabei am Rollatorgriff gehalten.




Vorsicht!


- Achten Sie darauf, dass der Rückengurt zu jeder Zeit vollständig in die Halterung eingesteckt ist. Es kann sonst zu schwerwiegenden Verletzungen kommen oder es können Beschädigungen am Rollator entstehen.
- Das maximale Nutzergewicht darf nicht mehr als 120 kg betragen.

Längeneinstellung des Rückengurtes

Der Rückengurt wird standardmäßig in der längstmöglichen Einstellung geliefert. Wenn Sie den Gurt gerne kürzer hätten, verstellen Sie die Befestigungsschiene auf einer oder beiden Seiten. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen hierfür zwei Schlitzschraubenzieher.

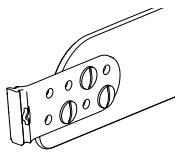


1. Alle drei Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen. Den zweiten Schraubenzieher von außen immer dagegenhalten. Schrauben herausnehmen und beiseite legen.

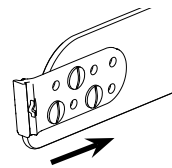


2. Befestigungsschiene am Rückengurt nach innen versetzen, alle drei Schrauben wieder in die dafür vorgesehen Löcher im Gurt schrauben und festziehen.

Zusätzliche Einstellung des Rückengurtes

Falls die Handgriffe Ihres Rollators sehr hoch eingestellt sind, kann es sein, dass die Höhe des Rückengurtes deshalb nicht für ein angenehmes Sitzgefühl sorgt. In diesem Fall kann der Rückengurt auch mit der Sichts Aussparung nach unten angebracht werden. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen hierfür zwei Schlitzschraubenzieher. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschiene auf der Innenseite des Gurtes befestigt wird.

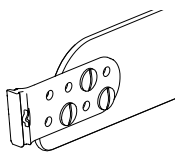

1. Alle drei Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen. Den zweiten Schraubenzieher von außen immer dagegenhalten. Schrauben und Befestigungsschiene beiseite legen.

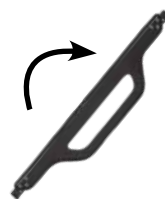

2. Den Gurt um 180 Grad drehen. Die Befestigungsschiene auf der Innenseite des Gurtes an der für sie richtigen Länge positionieren. Die drei Schrauben wieder in die dafür vorgesehen Löcher im Gurt schrauben und festziehen.

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen. ©2024 Saljol GmbH: alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.

Saljol comfort back belt


for Saljol Carbon Rollator and Allround Rollator

Instruction manual 

Manufacturer: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
Phone: +49 (0)8141 317740
Fax: +49 (0)8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de
Web: www.saljol.de/en

Product overview

- 1 Reflective stripes
- 2 Recess for better visibility of the floor in front of you
- 3 Breathable mesh lining
- 4 Fastening rail
- 5 Screws for length adjustment
- 6 Latching nose

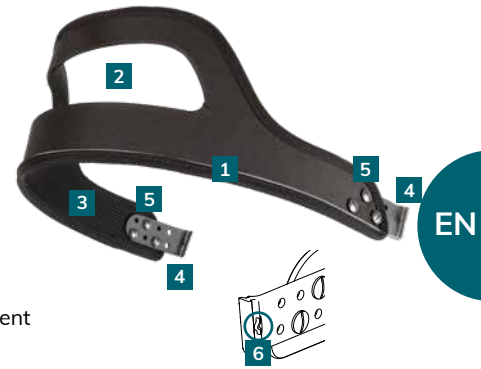

EN

Article number: 4058789015261



This back belt fits all Saljol Carbon/Allround Rollator models manufactured as of 12/2023, recognisable by the notch on the holders on the front of the handles.

Assembly/disassembly



Insert the two fastening rails of the back belt into the holders on the front of the handles of your Saljol Carbon/Allround rollator until the latching nose engages with a „click“. When fitting the back belt, always make sure that the reflective strip is on the outside.



Place one finger under the fastening rail as shown. Now pull the fastening rail out vertically upwards with your finger, holding your thumb against the rollator handle.




Caution!


- Make sure that the back belt is fully inserted into the holder at all times. Serious injuries may otherwise occur or damage may be caused to the rollator.
- The maximum user weight must not exceed 120 kg.

Length adjustment of the back belt

The back belt is delivered as standard with the longest possible adjustment. If you would like the belt to be shorter, adjust the fastening rail on one or both sides. To do this, take the belt out of the rollator's holders and place it in front of you. You will need two slotted screwdrivers for this.

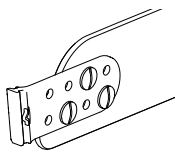


1. Loosen all three screws with a screwdriver. Always hold the second screwdriver against it from the other side. Remove the screws and put them aside.

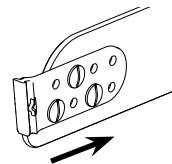


2. Move the fastening rail on the back belt inwards, screw all three screws back into the holes provided in the belt and tighten.

Additional adjustment of the back belt

If the handles of your rollator are set very high, the height of the back belt may therefore not provide a comfortable sitting feeling. In this case, the back belt can also be fitted with the opening recess facing downwards. To do this, take the belt out of the rollator's holders and place it in front of you. You will need two slotted screwdrivers for this. Make sure that the fastening rail is attached to the inside of the belt.

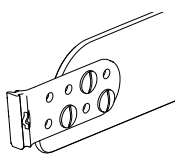

1. Loosen all three screws with a screwdriver. Always hold the second screwdriver against it from the other side. Remove the screws and fastening rail and put them aside.

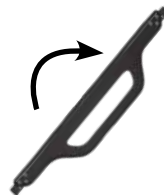

2. Turn the belt 180 degrees, reposition the fastening rail on the inside of the belt to the correct length for you and screw all three screws back into the holes provided in the belt and tighten.

Information correct at time of printing. Technical specifications are subject to change without notice. Technical drawings and photos may differ from reality. ©2024 Saljol GmbH: all rights reserved. Reprints, including excerpts, are only permitted with the permission of Saljol GmbH.

04/2024